



# TAOS 700


Sillón dental TAOS700 con un diseño inteligente. Lanzamos esta silla al mercado por primera vez en 2011. Esta es la elección correcta de silla para actualizar su consultorio o establecer uno nuevo.



# TAOS700

Cojín de 1,8 metros, material PU, duradero y fácil de limpiar.

Extensión de plástico de 10 cm como opción, hace que el paciente se sienta más cómodo para acostarse en este cojín.

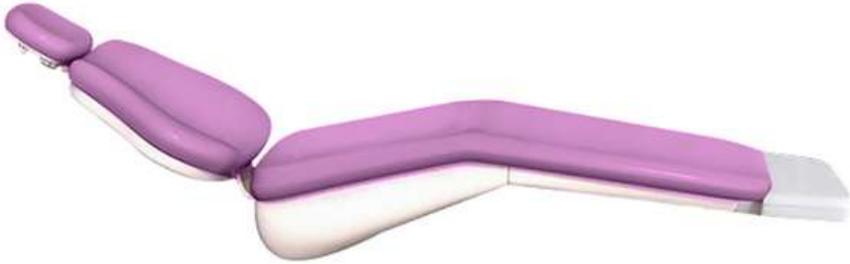

MOTOR:

Funciona silenciosamente, se detiene y comienza suavemente durante el posicionamiento del paciente, brinda una experiencia de tratamiento cómoda.



Luz del sensor de 4 ojos, la bombilla LED está en una pequeña línea de radianes, la luz es más enfocada y lo suficientemente brillante.

Succión eléctrica incorporada, función única de la compañía Lingchen, gran potencia y ruido aceptable. Construido con estilo: ahorre espacio.

El portalámparas y el soporte del monitor están separados, no se unen, por lo que no hay conflicto cuando el dentista usa la lámpara y el monitor. Y es muy flexible para moverse.

# TAOS700

Pedal multifunción: hace que el profesional pueda controlar todas las funciones del sillón dental.



## OPCIÓN COMPLETA DEL SILLÓN DENTAL TAOS700:

- Pieza de mano de alta velocidad con tecnología de equilibrio Dymanic.
- Juego completo de pieza de mano de baja velocidad.
- Scaler incorporado con luz Led, dos asas.
- Lámpara de polimerización Led de 1200 intensidades.
- Cámara de video.
- Compresor de aire de 1100w, capacidad de 50L.



Luna I DMB turbine,2pcs,with dynamic balance,6 hole spray,white light,push button,torque head.



Full set low speed handpiece (contra angle and straight), ball bearing



Air compressor AC1100




Lingchen built in LED scaler



LED curing light,intensity1500lux



Video camera full set,17"monitor

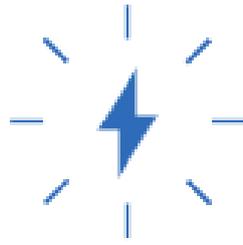

Voltaje nominal	AC220V- 230V/ AC 110-120V, 50Hz/ 60Hz
Presión del agua	2,0-4,0 bares
Flujo de agua	$\geq 10\text{L/min}$
Consumo de aire	Succión seca y húmeda $\geq 55 \text{ l/min}$ (5,5-8,0 bar)
Consumo de agua	Presión negativa del aire $\geq 55\text{L/ min}$
Capacidad de carga de la silla del paciente	180KG
Rango de altura base	Punto bajo: 343 mm Punto alto 800 mm
Reposacabezas	Reposacabezas deslizante de doble articulación; liberación de palanca
Potencia de entrada	1100VA
Mando de silla	Panel táctil del sistema de entrega o interruptor de pie
Opciones de tapicería	Cuero de microfibra o PU




# TAOS 800

Lingchen Tender king, más de 1000 juegos de sillones dentales TAOS800 se han enviado a universidades desde 2010. Tenga la seguridad de que este es el sillón adecuado para su universidad, como lo es para universidades de todo el mundo.



# TAOS800

Cojín para sillón dental con tamaño estándar, las opciones: se puede extender 20 cm, diseño especial para personas altas, para mayor comodidad.

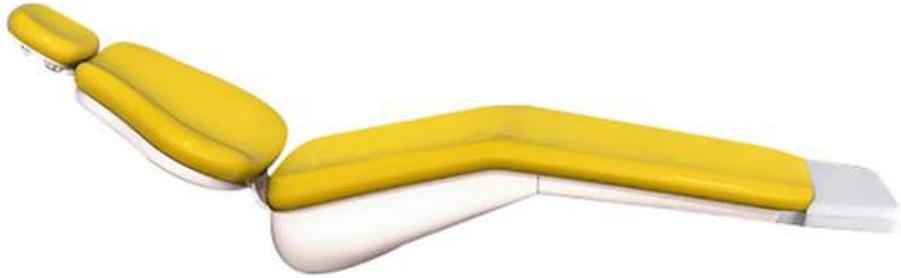

Distancia de trabajo correcta: el diseño y el ángulo de la bandeja de operación del sillón dental consideran el espacio adecuado para el trabajo del dentista; el diseño de la escupidera y la distancia al cojín están bien calculadas.



**CAPACIDAD DEL SILLÓN DENTAL:**

150 KG, 100% coincidente con el estándar CE.

**MOTOR:**

El fabricante de motores con más de 20 años de historia, No.1 en China. El motor del sillón dental funciona sin problemas y proporciona un tratamiento cómodo para las personas.

# TAOS800

Sillón dental con luz LED de 4 ojos, con sensor, sin tocar la luz, detiene la infección cruzada.



## FUNCIÓN ÚNICA:

Fuerte succión que funciona con electricidad: desarrollada por LINGCHEN DENTAL, muy potente y que funciona sin problemas, el paciente se siente cómodo. Instalar la bomba de succión no es necesario mientras que la silla dental con succión eléctrica ahorra espacio y costos.




Buena posición para el soporte de la pantalla LCD, no entra en conflicto con el brazo de la lámpara, es más fácil para el paciente ver la pantalla LCD y los dentistas trabajan cómodamente.

## OPCIÓN COMPLETA DEL SILLÓN DENTAL TAOS800:

Opciones completas para su elección: ahorre costos y el dentista se sienta relajado con la unidad dental completa Turbina de luz LED de 2 piezas + 1 juego de pieza de mano de baja velocidad + escalador LED con pieza de mano de escalador de 2 piezas + lámpara de polimerización + cámara oral con pantalla de 17 " + compresor de 1100W.



Luna I DMB turbine, 2 pcs, with dynamic balance, 6 hole spray, white light, push button, torque head.

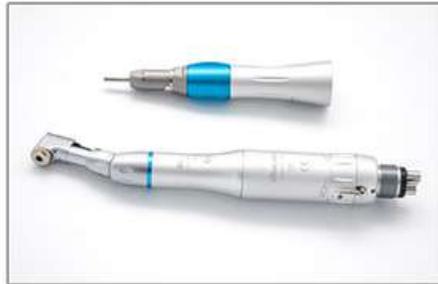

Full set low speed handpiece (contra angle and straight), ball bearing



Lingchen built in LED scaler




LED curing light, intensity 1500lux




Video camera full set, 17" monitor



Air compressor AC1100

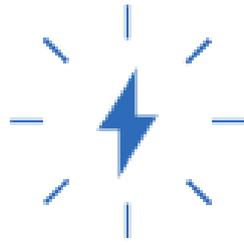


Voltaje nominal	CA 220 V- 230 V/ CA 110- 120 V, 50 Hz/ 60 Hz
Presión del agua	2,0-4,0 bares
Flujo de agua	$\geq 10\text{L}/\text{min}$
Consumo de aire	Succión seca y húmeda $\geq 55 \text{ l}/\text{min}$ (5,5-8,0 bar)
Consumo de agua	Presión negativa del aire $\geq 55\text{L}/\text{min}$
Capacidad de carga de la silla del paciente	150KG
Rango de altura base	Punto bajo: 343 mm Punto alto 800 mm
Reposacabezas	Reposacabezas deslizante de doble articulación; liberación de palanca
Potencia de entrada	1100VA
Mando de silla	Panel táctil del sistema de entrega o interruptor de pie
Opciones de tapicería	Cuero de microfibra o PU

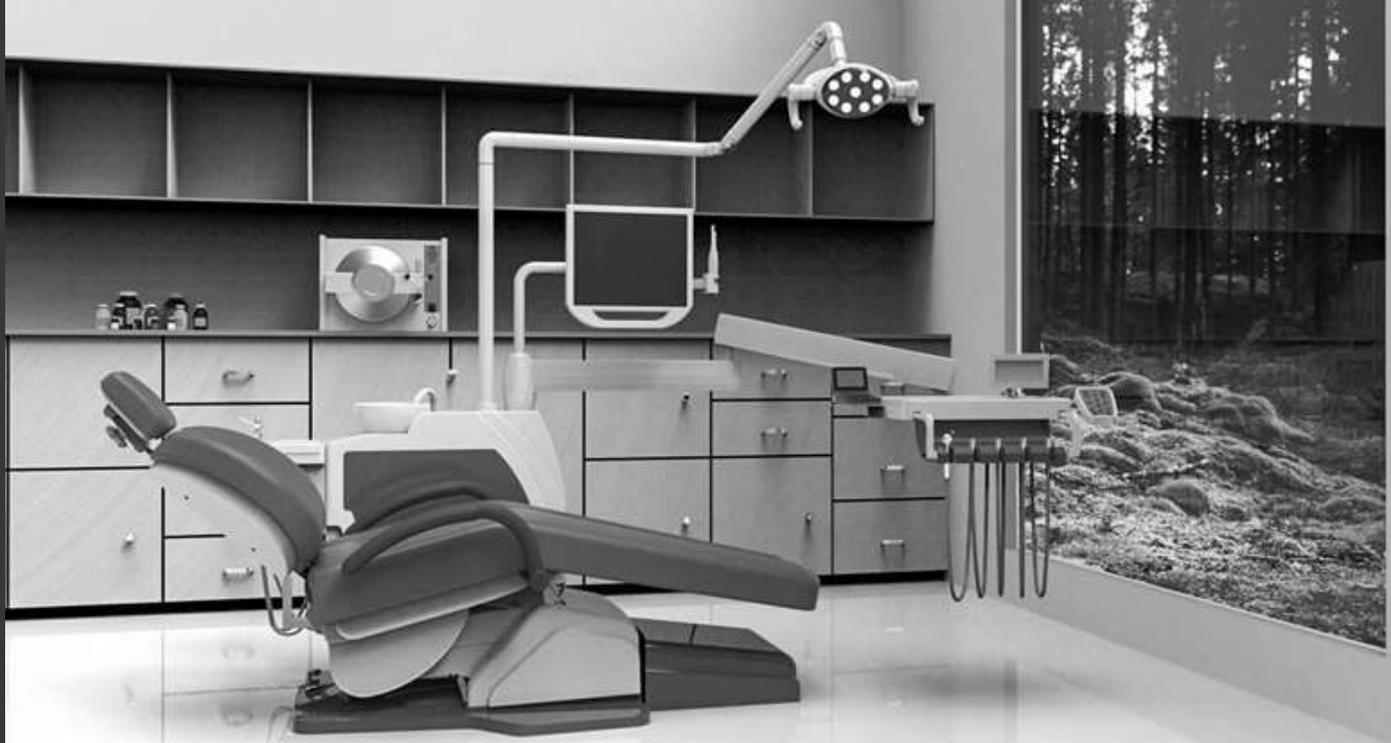

# TAOS 900

Uso: Cirugía, RCT, Implante, Educación. Un diseño imaginativo: ahorro de tiempo y dinero. Los sistemas de microscopio y rayos X están integrados en el cuerpo de la unidad dental para tratamientos más cómodos y eficientes. Proporcionar un gran espacio de operación, que es necesario para todas las operaciones y tratamientos ambulatorios.

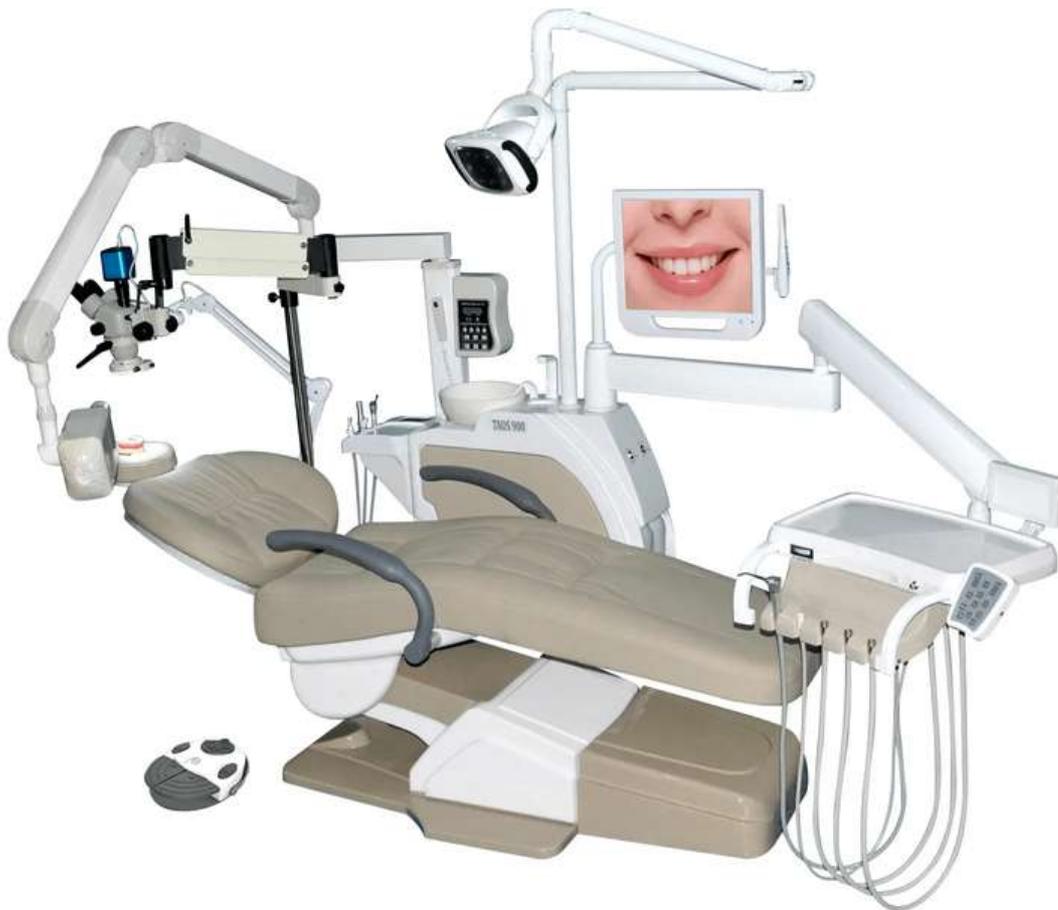


# TAOS900

La Unidad Dental viene con un cojín largo con una cubierta de cuero de microfibra de 2,2 mts., es excepcionalmente adecuado para pacientes más grandes y altos durante los tratamientos. Con un reposacabezas de doble articulación y un cómodo asiento, que se puede subir y bajar libremente con un rango de 380 mm a 800 mm y no incluye la altura del asiento anterior almacenada en la memoria. También es excelente para pacientes ancianos y mujeres embarazadas, y otros pacientes con movilidad limitada.



## ESPACIO DE TRABAJO OPTIMIZADO:

Cada distancia calculada en el diseño del sillón dental es una medida de precisión para mantener la comodidad y la ergonomía.

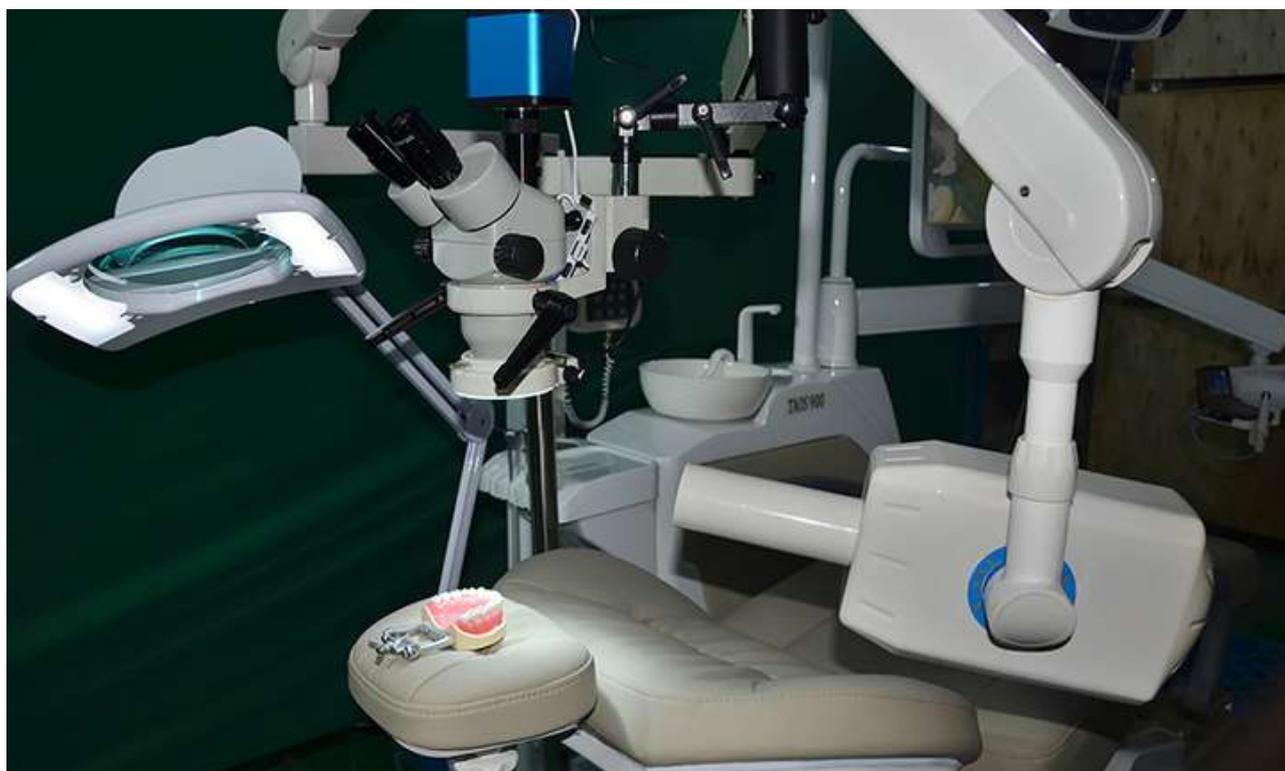

# TAOS900

## MARCO DE METAL:

la capacidad de peso de nuestro sillón dental patentado es de 180 kg debido al uso de un marco de acero grueso y denso.

## MOTOR:

Los motores de nuestros sillones dentales están diseñados para funcionar silenciosamente con arranques y paradas suaves para una experiencia de posicionamiento del paciente más cómoda.



## LÁMPARA LED DE FUNCIONAMIENTO DEL FILTRO CON CÁMARA INTEGRADA.

Para evitar la luz cegadora directa y aguda en los ojos de los pacientes y los dentistas y, en general, para hacer una experiencia más cómoda para los pacientes y los dentistas, hemos diseñado nuestra lámpara LED de operación filtrada que brinda una luz enfocada y pacífica para todos. Y para rematar, nuestra cámara integrada brinda una mejor vista general durante el tratamiento.



# TAOS900

## SUCCIÓN ELÉCTRICA INCORPORADA:

nuestra succión sin bomba funciona perfectamente con mucha potencia y reemplazará los sistemas de bomba de vacío históricamente anticuados, ahorrando tiempo, dinero y espacio.



## PEDAL WIFI:

No limitado por el cable, nuestro pedal de pie Wi-Fi libera al dentista para usar el pie izquierdo o derecho, lo que facilita una posición de trabajo más relajada y cómoda.



## MICROSCOPIO II CON AUTOFOCUS:

Este dispositivo mejora la eficiencia del dentista que a su vez aumenta el rendimiento de la clínica. Distancia de trabajo de 25 cm, 5 niveles de aumento diferentes, siendo el mayor de 50 X.

# TAOS900

## RAYOS X:

Lo suficientemente largo para llegar al lado izquierdo o derecho del paciente. Opciones de 60/65/70KV.

## SILLA LUPA:

Aumento de 3,5X, con luz LED



# TAOS900

## OPCIONAL:

Compresor de aire, raspador LED incorporado, cámara oral con pantalla, lámpara de polimerización, piezas de mano dentales.



Luna I DMB turbine,2pcs,with dynamic balance,6 hole spray,white light,push button,torque head.



Full set low speed handpiece (contra angle and straight), ball bearing



Lingchen built in LED scaler




LED curing light,intensity1500lux



Video camera full set,17"monitor



Air compressor AC1100

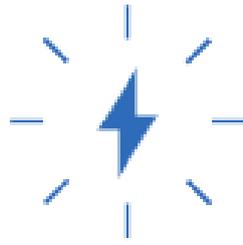

Voltaje nominal	AC220V- 230V/ AC 110-120V, 50Hz/ 60Hz
Presión del agua	2,0-4,0 bares
Flujo de agua	$\geq 10\text{L}/\text{min}$
Consumo de aire	Succión seca y húmeda $\geq 55 \text{ l}/\text{min}$ (5,5-8,0 bar)
Consumo de agua	Presión negativa del aire $\geq 55\text{L}/ \text{min}$
Capacidad de carga de la silla del paciente	180KG
Rango de altura base	Punto bajo: 343 mm Punto alto 800 mm
Reposacabezas	Reposacabezas deslizante de doble articulación; liberación de palanca
Potencia de entrada	1100VA
Mando de silla	Panel táctil del sistema de entrega o interruptor de pie
Opciones de tapicería	Cuero de microfibra o PU



# Q1

## CON MÚSICA

La silla infantil más **económica** del mundo, y es divertida para niños y niñas por igual. Nuestra silla infantil tiene un precio asequible por lo que su compra es fácil. Esta silla puede ser muy útil para hacer que la visita al dentista de un niño sea un momento más divertido para que el dentista pueda completar el tratamiento más rápido con menos ansiedad.



# Q1

## CON MÚSICA



Tamaño del cojín 1,6 m, espacio espacioso en el automóvil, los cojines ergonómicos para sillas dentales dentales son una forma eficiente de reducir la incomodidad del paciente. LINGCHEN dental ofrece reposacabezas para sillones dentales de primera calidad, almohadas para el cuello, fundas para sillones dentales y almohadillas para sillones dentales que mejoran la comodidad, el control de infecciones y brindan una calidad de construcción inigualable para todos los sillones dentales. Amplio espacio en el coche.



### FUNCIONES DEL AUTOMÓVIL:

Volantes giratorios, altavoz del automóvil, música, relajación del paciente durante el tratamiento.

# Q1

## CON MÚSICA



Con la bandeja de operación estándar con la que el dentista está familiarizado, la bandeja de operación es una de las herramientas más necesarias y útiles para todo profesional.

La bandeja de instrumentos contiene todos los instrumentos necesarios para que trabaje el dentista.


### MOTOR:

Seleccione 2021 productos de motor de silla dental de alta calidad al mejor precio de China certificada Dental. Electricidad de silla dental N4000 y motor N8000

# Q1

## CON MÚSICA

Lejos de tener preocupación debido a la débil potencia de succión durante el trabajo, que la mayoría de los dentistas tienen por este punto.

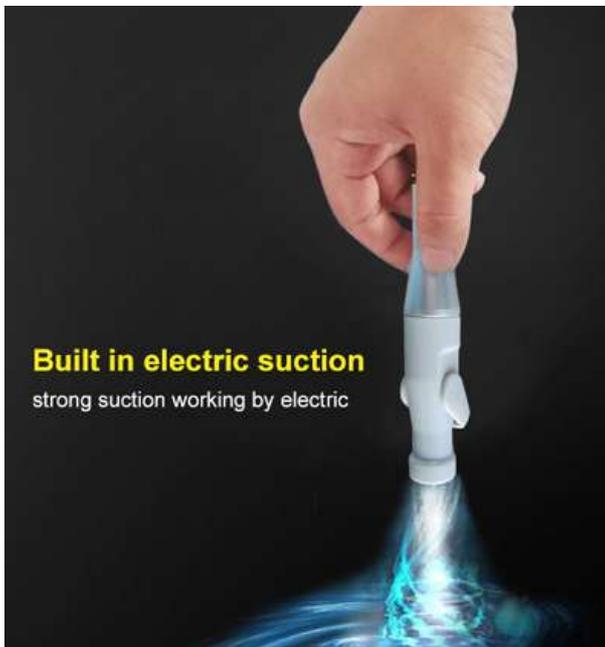

La luz LED de 4 ojos, fuerte para proteger su ojo, múltiples fuentes de luz LED que pueden usarse en el entorno dental ha creado una preocupación sobre el mayor riesgo potencial de daño ocular, es importante elegir la lámpara adecuada.


# Q1

## CON MÚSICA

Una amplia variedad de opciones de sillones dentales completamente equipados están disponibles para usted, cuando recibe el sillón, puede trabajar directamente.



Luna I DMB turbine, 2pcs, with dynamic balance, 6 hole spray, white light, push button, torque head.

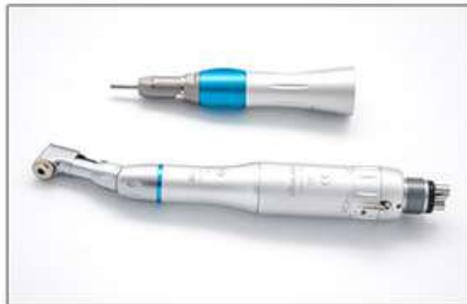

Full set low speed handpiece (contra angle and straight), ball bearing



Lingchen built in LED scaler



LED curing light, intensity 1500lux



Video camera full set, 17" monitor




Air compressor AC1100

# Q1

CON MÚSICA



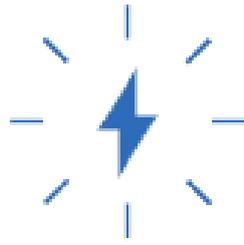

Voltaje nominal	AC220V- 230V/ AC 110-120V, 50Hz/ 60Hz
Presión del agua	2,0-4,0 bares
Flujo de agua	$\geq 10\text{L/min}$
Consumo de aire	Succión seca y húmeda $\geq 55 \text{ l/min}$ (5,5-8,0 bar)
Consumo de agua	Presión negativa del aire $\geq 55\text{L/ min}$
Capacidad de carga de la silla del paciente	180KG
Rango de altura base	Punto bajo: 343 mm Punto alto 800 mm
Reposacabezas	Reposacabezas deslizante de doble articulación; liberación de palanca
Potencia de entrada	1100VA
Mando de silla	Panel táctil del sistema de entrega o interruptor de pie
Opciones de tapicería	Cuero de microfibra o PU



# Q2

## TOM&JERRY

Q2 Kids Dental Chair autodesarrollado por LINGCHEN DENTAL, con una caricatura favorita de los niños para ayudar a relajar al niño paciente. Ha sido diseñado para ofrecer el flujo de trabajo más fluido posible para el equipo dental y la experiencia de tratamiento más placentera que se pueda imaginar para pacientes jóvenes de todos los tamaños y edades. Con el sillón dental para niños LINGHCEN Q2, su clínica puede beneficiarse de una experiencia dental sin estrés.



# Q2

## TOM&JERRY



Este cojín para sillón dental es lo suficientemente largo. Los niños estarán muy cómodos para acostarse en él. El volante se puede mover, los niños lo pagan como su juguete de automóvil. Disminuya su nerviosismo, el dentista puede tener una buena comunicación con los niños pacientes.



Tom es una sola unidad, los niños están muy familiarizados con Tom casue la caricatura Tom & Jerry. Será como un amigo al lado de los niños, hará que se sientan relajados cuando reciban tratamiento.

# Q2

## TOM&JERRY



Bandeja de operación de silla dental de Italia, el diseño especial para un mejor trabajo. Con dos asas, muy flexible y el espacio es lo suficientemente grande.



Motor con gran potencia, movimientos del sillón dental hacia arriba y hacia abajo sin problemas.

# Q2


## TOM&JERRY



Filter lamp with camera



Lámpara LED de funcionamiento del filtro con cámara incorporada. Para evitar que la luz aguda directa sobre los ojos del paciente y los ojos del dentista cause molestias durante el tratamiento, se desarrolla una lámpara LED de operación de filtro, con luz focalizada y pacífica para las personas; Cámara integrada para una mejor visión durante el tratamiento.

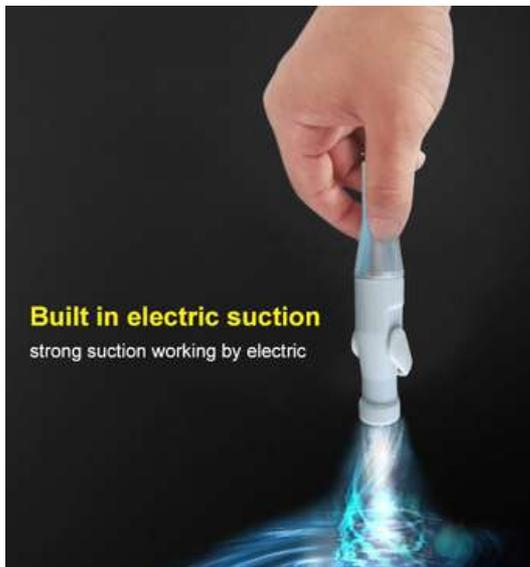

**Built in electric suction**  
strong suction working by electric

Sillón dental construido con succión, funciona con electricidad, la potencia es más fuerte. Disminuya la queja del dentista por succión débil. El ruido es aceptable, no molesta al paciente ni al dentista durante el tratamiento.




## LA OPCIÓN COMPLETA INCLUYE:


- Pieza de mano de alta velocidad de equilibrio dinámico de dos piezas, calificada y duradera.
- Una pieza de mano de baja velocidad de juego completo, vende más de 5 años, casi cero quejas.
- Scaler led con 2 asas.
- Lámpara de polimerización led -1200 de intensidad.
- Cámara intraoral, con función de video e imagen.
- Compresor de aire, 1100w, 50L.



Luna I DMB turbine, 2pcs, with dynamic balance, 6 hole spray, white light, push button, torque head.

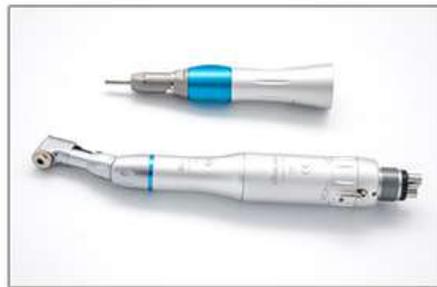

Full set low speed handpiece (contra angle and straight), ball bearing

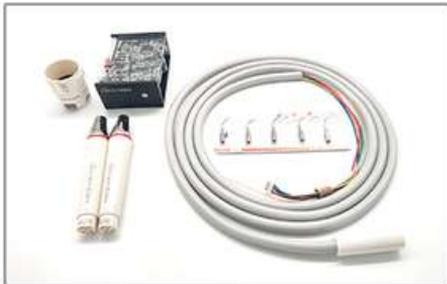

Lingchen built in LED scaler




LED curing light, intensity 1500lux



Video camera full set, 17" monitor



Air compressor AC1100

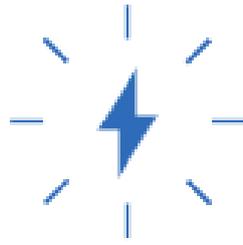

Voltaje nominal	CA 220 V- 230 V/ CA 110- 120 V, 50 Hz/ 60 Hz
Presión del agua	2,0-4,0 bares
Flujo de agua	$\geq 10\text{L/min}$
Consumo de aire	Succión seca y húmeda $\geq 55 \text{ l/min}$ (5,5-8,0 bar)
Consumo de agua	Presión negativa del aire $\geq 55\text{L/ min}$
Capacidad de carga de la silla del paciente	180KG
Rango de altura base	Punto bajo: 343 mm Punto alto 800 mm
Reposacabezas	Reposacabezas deslizante de doble articulación; liberación de palanca
Potencia de entrada	1100VA
Mando de silla	Panel táctil del sistema de entrega o interruptor de pie
Opciones de tapicería	Cuero de microfibra o PU



# **MEDITRIBUCIONES**

INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS

Catalina Aldáz y Portugal, Edif. Bristol Parc Torre 2, Oficina 201,  
Quito, Ecuador

093 993 4724 | 099 310 6481 | 099 453 3311  
[ventas@meditribuciones.com](mailto:ventas@meditribuciones.com) | [www.meditribuciones.com](http://www.meditribuciones.com)

