

Datos técnicos	A-17 PLUS	A-22 PLUS	A-28 PLUS
Tensión de alimentación		220/240V 50Hz 220/230V 60Hz	
Potencia nominal		2300 W	
Dimensiones externas A x H x P		480 x 500 x 600 mm	
Dimensiones Cámara D x P	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso total	51 kg	52 kg	53 kg
Capacidad depósito		4,5 litros	
Autonomía (con nivel máx. de agua)	De 7 a 11 ciclos	De 6 a 10 ciclos	De 5 a 9 ciclos

CICLO	Tipo de ciclo	Tiempo de esterilización (min.)	Tiempos ciclo incluyendo el tiempo de esterilización y excluyendo el tiempo de secado (min.)			
			A-17 PLUS	A-22 PLUS	A-28 PLUS	Secado*
134 °C UNIVERSAL	B	4	29	31	39	13-17
121 °C UNIVERSAL	B	20	45	48	52	13-17
134 °C VELOCE	S	4	20	23	26	1
134°C SÓLIDOS ENVASADOS	S	4	20	24	28	13-17
134°C PRIÓN	B	18	43	45	53	13-17
xxx °C CUSTOM	S	Ciclo personalizable por el usuario con temperaturas 134 °C / 121 °C, tiempos de proceso a partir de 4' (134 °C) o 20' (121 °C) y secado programable.				
TEST DE VACÍO		TEST	18	18	19	
HELIX/B&D TEST		TEST	20	24	28	
VACUUM + HELIX/B&D TEST (ejecutados en secuencia)		TEST	42	46	51	

\* El secado varía en función del modelo y del volumen de la máquina  
 Nota: los tiempos no consideran el intervalo de precalentamiento máx. (10 min.).  
 Nota: el tiempo puede variar en función de la carga y de la alimentación eléctrica.  
 Nota: el tiempo referido a los modelos de 120 V puede sufrir incrementos de hasta un máximo del 20%



Making Your Life Better.

## MEDITRIBUCIONES

Distribuidor Oficial en Ecuador  
 Catalina Aldáz y Portugal, Edif. Bristol Parc Torre 2,  
 Oficina 201, Quito, Ecuador | 02 3325397 | 099 453 3311



# A PLUS

## AUTOCLAVES ANTHOS A PLUS

A-17 PLUS  
 A-22 PLUS  
 A-28 PLUS

# W

# e

# e

# r

# n

## INNOVACIÓN SÓLIDA



# Agua corriente, no precisa nada más

**FILTRADO INTEGRADO CON  
UNA MÁQUINA AUTÓNOMA**

## Cómo funciona

A diferencia de los autoclaves tradicionales, A Plus no requiere una conexión hídrica externa para el tratamiento del agua corriente. El usuario puede llenar el depósito principal simplemente con agua de grifo, gracias al filtro desmineralizador allí ubicado. Esto permite racionalizar ampliamente los espacios, simplificar los procesos y obtener un ahorro notable. El sistema de filtrado de A Plus asegura una simplicidad de procedimiento sin precedentes.

## Eficiencia y ahorro

Nunca antes una esterilizadora había ofrecido prestaciones tan elevadas con costes de uso tan bajos. Gracias al filtro de A Plus, que se encarga de desmineralizar el agua, el usuario no tendrá que abastecerse de agua desmineralizada, será suficiente llenar el depósito de la máquina con agua de grifo. El almacenamiento de los bidones y el deterioro de las piezas internas de las máquinas provocado por la mala calidad del agua, a partir de hoy solo serán un recuerdo.



## DISPLAY LCD.

A Plus es la esterilizadora inteligente y una herramienta de trabajo indispensable que garantiza excelentes prestaciones, entre otras cosas, gracias al display LCD táctil a color con interfaz de usuario sencilla e intuitiva. Los distintos datos de control están representados por iconos que permiten comprender de inmediato el estado de la máquina.




## Di.V.A.

Digital Virtual Assistant, este es el significado de la sigla Di.V.A. El primer sistema de control y trazabilidad para dispositivos de esterilización en el Cloud. Los datos guardados estarán a disposición de los operadores al acceder a la página web a ello dedicada.



## Asistencia técnica remota con Easy Check.

Todos los autoclaves de la línea A Plus están equipados con WiFi integrado y puerto Ethernet. Conectándolos a Internet y activando el servicio Easy Check, pueden recibir asistencia remota. Se reduce drásticamente el tiempo de asistencia, con lo que el técnico puede mantener la eficiencia de las máquinas de forma constante.

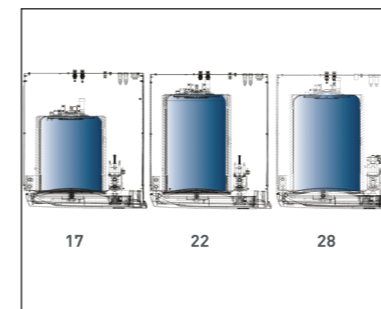

## Tres capacidades, un solo tamaño.

La línea A Plus está disponible con 17, 22 y 28 litros de capacidad. Tres capacidades diferentes para que el usuario pueda escoger la máquina que más se adapta a sus necesidades. Las medidas externas, que son idénticas en las tres máquinas, ofrecen facilidad de instalación. Los modelos de 17 y 22 litros cuentan con cinco bandejas, mientras que la versión de 28 litros tiene seis.



## Software de trazabilidad.

MyTrace es el software de trazabilidad para A Plus. Gracias a este programa se puede asociar el set de instrumentos esterilizados con el paciente con un código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.



## Impresora.

Para completar la línea A Plus, se encuentra disponible como accesorio opcional una impresora externa capaz de imprimir informes o etiquetas con códigos de barras.